


Propper Manufacturing Company VAPOR LINE®

Integratore di sterilizzazione a vapore

Descrizione del prodotto

L'integratore di sterilizzazione a vapore della Propper Manufacturing Company VAPOR LINE (26900925, 26900510) è un integratore chimico a lettura immediata per il monitoraggio delle condizioni essenziali della sterilizzazione a vapore negli sterilizzatori a gravità e pre-vuoto. I risultati appropriati di VAPOR LINE sono equivalenti in termini di prestazioni agli indicatori biologici (BI) con un margine di sicurezza aggiuntivo. Le strisce indicatrici Propper VAPOR LINE sono indicatori integrativi di tipo 5 ISO 11140-1:2014, utilizzati per il rilascio delle confezioni o in confezioni di prova con un indicatore biologico per il rilascio del carico durante la sterilizzazione a vapore a 121°C e 134°C (250°F e 273 °F). Quando richiedono eccezioni mediche documentate, è possibile rilasciare un impianto contenente carico in base ai risultati di Propper VAPOR LINE Integrator, prima che il risultato della BI sia noto.

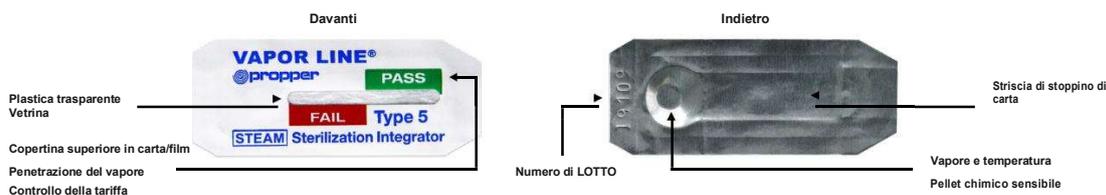

Istruzioni per l'uso

1. Collocare un Integratore VAPOR LINE appropriato in ogni confezione da sterilizzare. Posizionare l'integratore nella zona giudicata più resistente alla penetrazione del vapore. Sigilla la busta.
2. Trattare la confezione come di consueto in uno sterilizzatore a vapore.
3. Esaminare il VAPOR LINE Integrator per verificare che la barra scura ha superato l'area rossa FAIL e ha raggiunto l'area verde PASS. Ciò indica che le condizioni di sterilizzazione sono state soddisfatte.
4. Se la barra scura non ha raggiunto l'area verde PASS, le condizioni di sterilizzazione non sono state soddisfatte. L'intero pacco deve essere rilavorato secondo le procedure stabilite per il ritrattamento dei pacchi. Quando si prepara la confezione per la sterilizzazione inserire all'interno un nuovo integratore Propper VAPOR LINE.

Valore dichiarato


Temperatura	Tempo
121°C	20 min
132°C	4 min
134°C	3 min
135°C	2,5 min

Condizioni di stoccaggio

Conservare Propper VAPOR LINE Integrator a meno di 32°C (90°F) e 35%-70% di umidità relativa, lontano dalla luce solare.

Processato

Linea di demarcazione delle 2 finestre

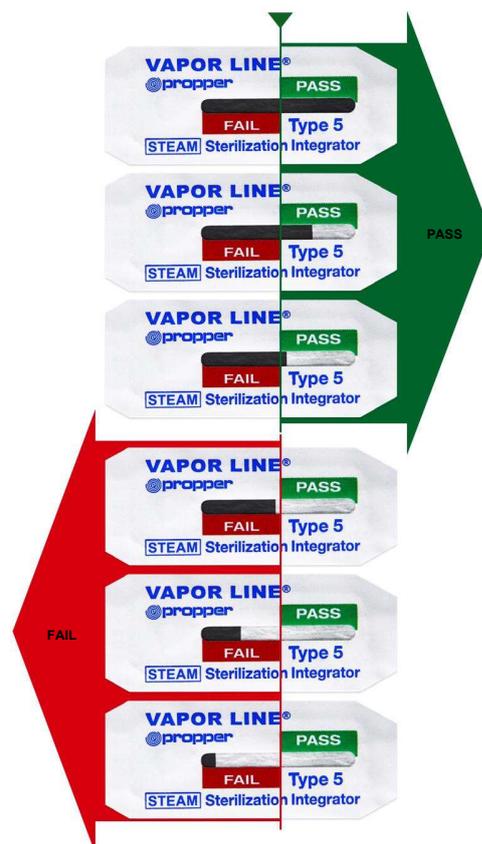

36-04 Viale dell'uomo d'abilità
Long Island City, NY 11101
Tel. (718) 392-6650 • Fax. (718) 482-8909
www.proppermfg.com