


iRoot Apex

Rilevatore apicale

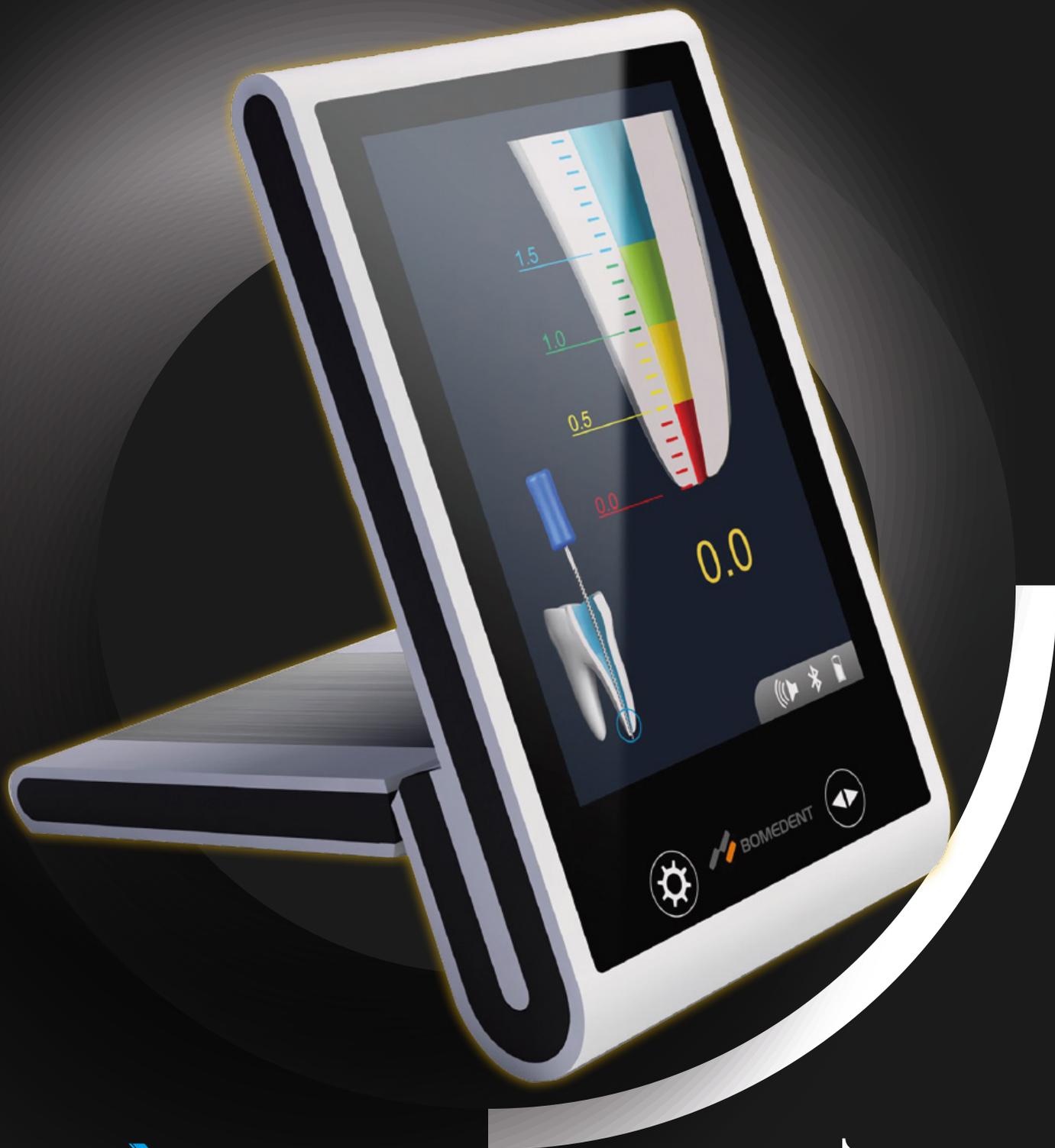

iRoot Apex

Localizzatore apicale compatto.

La qualità del suo display con colori reali semplifica il lavoro del professionista nello studio dentistico.



Collegamento Bluetooth:

Si collega via Bluetooth al micromotore iRoot Pro, indicando sul display velocità e torque.

Giroscopio di precisione:

iRoot Apex è dotato di un giroscopio ad alta precisione in modo che lo schermo si adatti a diversi orientamenti.

Avviso sonoro:

Il dispositivo emette un segnale acustico sempre più frequente quando la punta del file si avvicina all'apice

Display di alta qualità:

La qualità del suo display a colori semplifica il lavoro del professionista nello studio dentistico.



Tecnologia multifrequenza

Sistema di calibrazione automatica per garantire misure accurate.




Bluetooth

consente la sincronizzazione del localizzatore con iRoot Pro.



Display LCD

ad alta risoluzione con ampio angolo di visione. Touch da 3,5"

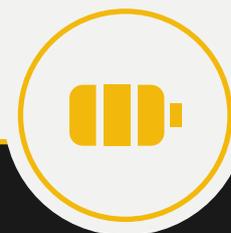

Batteria

ricaricabile in circa 120 minuti e garantisce una durata di circa 5h

SPECIFICHE TECNICHE

Batteria: 1000 mAh / 3.7 V

Dimensioni: 110x65x20mm

Display: 3.5 LCD TFT con ampio angolo di visione

Adattatore: ~ 100-220 V. 50/60 Hz

Peso: 185 gr

Consumo energetico: $\leq 0,6$ W



Giroscopio di precisione