

WispeX

Rilevatore apicale



Wisplex



Localizzatore apicale con **tecnologia avanzata multifrequenza** che grazie alle ridotte dimensioni, all'auto calibrazione e all'alta precisione sia nei canali bagnati che nei canali asciutti, risulta essere semplice e comodo da trasportare e posizionare all'interno dello studio.

Display colorato e avviso sonoro:

Sul display compare una scala colori che identifica la posizione dello strumento nel canale radicolare. Wisplex avvisa quando il file endodontico è a meno di 2,2 mm dall'apice.

Cavetto Micro-USB:

Se collegato al micromotore iRoot Pro, indica sul display velocità e torque. Il collegamento al micromotore Endo Wise è possibile attraverso cavetto Micro-USB.

Lunghezza di lavoro regolabile:

Lunghezza di lavoro impostabile e modificabile.

Sensitive:

Performance non alterate da sangue o polpa nel canale radicolare e invariate per ogni tipologia di dente.



Tecnologia multifrequenza

calibrazione automatica per garantire misure accurate.




Facile da trasportare

grazie alle dimensioni ridotte.



Display Digitale

schermo TFT ad alta definizione

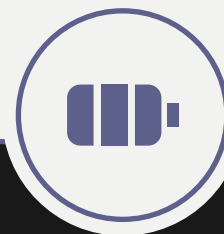

Batteria

ricaricabile in circa 180 minuti

SPECIFICHE TECNICHE

Batteria: 950 mAh / 3.7 V

Dimensioni: 94x60x13mm

Display: 2.8" TFT color LCD

Adattatore: ~ 100-240 V. 50/60 Hz

Peso: 85 gr

Consumo energetico: $\leq 0,6$ W