


BREATH YOU[®]



UNI EN14683 chirurgica medicale tipo IIR
99 % BFE efficienza filtrazione batterica

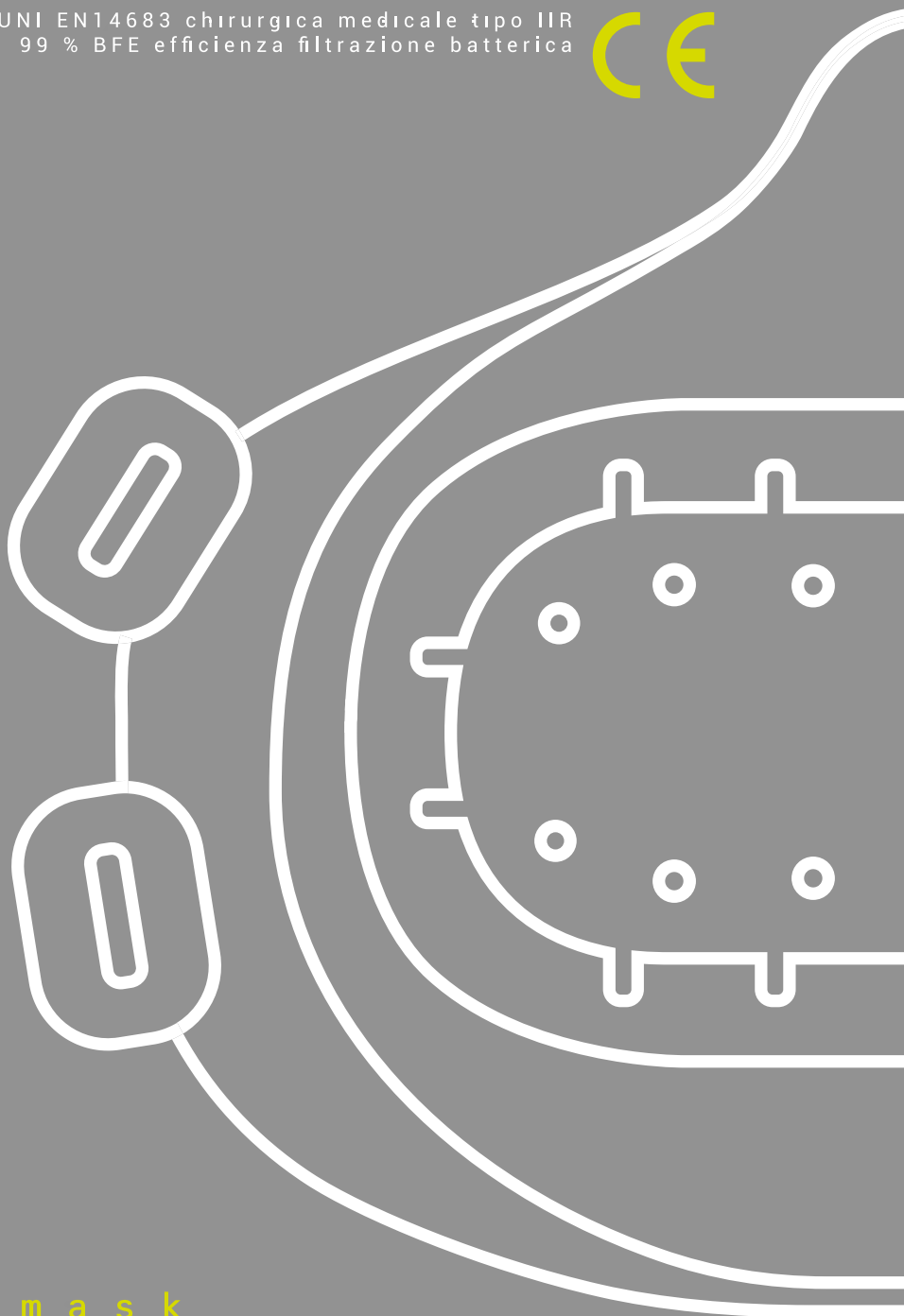

get your mask



g e t y o u r m a s k



Come nasce il progetto

ERREPI storica azienda nella produzione di materiali polimerici e biodegradabili, affianca la creazione di una nuova azienda, la VR srl: costituita da un pool di esperti per la creazione e produzione di mascherine medicali. ERREPI è un'azienda italiana che da sempre contribuisce a rendere grande il made in Italy nel mondo. Consapevoli della necessità di indossare tali dispositivi per lunghi periodi e per molte ore al giorno, abbiamo creato un prodotto "leggero" che "respira" garantendo la massima sicurezza e il massimo confort. Per questo la nuova mascherina medicale di VR srl si chiama "Breathe You", per permettere a tutti di "Respirare" in modo naturale e in massima sicurezza.

ERREPI historic company in the production of polymeric and biodegradable materials, supports the creation of a new company, VR srl: consisting of a pool of experts for the creation and production of medical masks. ERREPI is an Italian company that has always contributed to making Made in Italy great in the world. Aware of the need to wear these devices for long periods and for many hours a day, we have created a "light" product that "breathes" guaranteeing maximum safety and maximum comfort. For this reason, the new medical mask by VR srl is called "Breathe You", to allow everyone to "breathe" in a natural way and in maximum safety.

Das historische Unternehmen ERREPI bei der Herstellung von polymeren und biologisch abbaubaren Materialien unterstützt die Gründung eines neuen Unternehmens, VR srl: bestehend aus einem Expertenpool für die Herstellung und Herstellung von medizinischen Masken. ERREPI ist ein italienisches Unternehmen, das immer dazu beigetragen hat, Made in Italy weltweit großartig zu machen. Wir sind uns der Notwendigkeit bewusst, diese Geräte über lange Zeiträume und viele Stunden am Tag zu tragen, und haben ein "leichtes" Produkt entwickelt, das "atmet" und maximale Sicherheit und maximalen Komfort garantiert. Aus diesem Grund heißt die neue medizinische Maske von VR srl "Breathe You", damit jeder auf natürliche Weise und mit maximaler Sicherheit "atmen" kann.

La empresa histórica ERREPI en la producción de materiales poliméricos y biodegradables, apoya la creación de una nueva empresa, VR srl: que consiste en un grupo de expertos para la creación y producción de máscaras médicas. ERREPI es una empresa italiana que siempre ha contribuido a hacer que Made in Italy sea genial en el mundo. Conscientes de la necesidad de usar estos dispositivos durante largos períodos y durante muchas horas al día, hemos creado un producto "ligero" que "respira" que garantiza la máxima seguridad y la máxima comodidad. Es por eso que la nueva máscara médica de VR srl se llama "Breathe You", para permitir que todos "respiren" de forma natural y con la máxima seguridad.

ERREPI entreprise historique dans la production de matériaux polymériques et biodégradables, soutient la création d'une nouvelle société, VR srl: constituée d'un pool d'experts pour la création et la production de masques médicaux. ERREPI est une entreprise italienne qui a toujours contribué à faire du Made in Italy une référence mondiale. Conscients de la nécessité de porter ces appareils pendant de longues périodes et de nombreuses heures par jour, nous avons créé un produit "léger" qui "respire" garantissant une sécurité et un confort maximum. C'est pourquoi le nouveau masque médical de VR srl s'appelle "Breathe You", pour permettre à chacun de "respirer" de manière naturelle et en toute sécurité.

Il prodotto Breathe You

Come proteggersi e proteggere gli altri senza sentirsi soffocare? "Breathe You" è la mascherina che respira in modo naturale. Breathe You è amica dell'ambiente: creata al 100% con materiali riciclabili, è riutilizzabile. Il suo involucro contiene un porta filtri in Polipropilene Medica e filtro composto da tre strati con un filtrazione di BFE uguale al 99%, sostituibile in modo semplice e rapido.

Breathe garantisce: - massimo comfort per 4/6 ore consecutive - risparmio (riutilizzo a ciclo continuo) - antiappannamento (per chi indossa occhiali) Breathe You nasce per rispondere alle esigenze di chi si trova in prima linea tutti i giorni ad affrontare l'emergenza, come medici, infermieri, farmacisti, ma anche per chi lavora nelle grandi catene e per il singolo che non vuole rinunciare a un prodotto di qualità.

How to protect yourself and protect others without feeling suffocated? "Breathe You" is the mask that breathes naturally. Breathe You is environmentally friendly: created 100% with recyclable materials, it is reusable. Its housing contains a Medical Polypropylene filter holder and a filter made up of three layers with 99% BFE filtration, which can be replaced quickly and easily. Breathe guarantees: - maximum comfort for 4/6 consecutive hours - savings (continuous cycle reuse) - anti-fog (for those who wear glasses) Breathe You was created to meet the needs of those who are on the front line every day to deal with the emergency, such as doctors, nurses, pharmacists, but also for those who work in large chains and for the individual who does not want to give up a quality product.

Wie kann man sich und andere schützen, ohne sich erstickt zu fühlen? "Breathe You" ist die Maske, die natürlich atmet. Breathe You ist umweltfreundlich: Es besteht zu 100% aus recycelbaren Materialien und ist wiederverwendbar. Das Gehäuse enthält einen Filterhalter aus medizinischem Polypropylen und einen dreischichtigen Filter mit 99% BFE-Filtration, der schnell und einfach ausgetauscht werden kann. Atmen garantiert: - Maximaler Komfort für 4/6 aufeinanderfolgende Stunden - Einsparungen (kontinuierliche Wiederverwendung) - Antibeschlag (für Brillenträger) Breathe You wurde entwickelt, um die Bedürfnisse derjenigen zu erfüllen, die jeden Tag an vorderster Front stehen, um den Notfall zu bewältigen wie Ärzte, Krankenschwestern, Apotheker, aber auch für diejenigen, die in großen Ketten arbeiten und für die Person, die nicht auf ein Qualitätsprodukt verzichten möchte.

Cómo protegerse y proteger a los demás sin sentirse sofocado? "Breathe You" es la máscara que respira naturalmente. Breathe You es ecológico: creado 100% con materiales reciclables, es reutilizable. Su carcasa contiene un portafiltro de polipropileno médico y un filtro compuesto por tres capas con un 99% de filtración de BFE, que puede reemplazarse rápida y fácilmente. Breathe garantiza: - máximo confort durante 4/6 horas consecutivas - ahorro (reutilización de ciclo continuo) - antivaho (para quienes usan anteojos) Breathe You fue creado para satisfacer las necesidades de aquellos que están en la línea del frente todos los días para enfrentar la emergencia, como médicos, enfermeras, farmacéuticos, pero también para quienes trabajan en grandes cadenas y para el individuo que no quiere renunciar a un producto de calidad.

Comment se protéger et protéger les autres sans se sentir étouffé? "Breathe You" est le masque qui respire naturellement. Breathe You est respectueux de l'environnement: créé à 100% avec des matériaux recyclables, il est réutilisable. Son boîtier contient un porte-filtre en polypropylène médical et un filtre composé de trois couches avec une filtration à 99% de BFE, qui peuvent être remplacés rapidement et facilement.

Breathe garantit: - un confort maximal pendant 4/6 heures consécutives - des économies (réutilisation en cycle continu) - anti-buée (pour ceux qui portent des lunettes) Breathe You a été créé pour répondre aux besoins de ceux qui sont en première ligne tous les jours pour faire face à l'urgence, comme les médecins, les infirmières, les pharmaciens, mais aussi pour ceux qui travaillent en grandes chaînes et pour l'individu qui ne veut pas renoncer à un produit de qualité.




Il suo involucro in TPE Medicale [1], contiene un porta filtri in Polipropilene Medicale [2] e filtro composto da tre strati con un valore di BFE uguale al 99% [3], sostituibile in modo semplice e rapido.

Its Medical TPE casing [1] contains a Medical Polypropylene filter holder [2] and filter composed of three layers with a BFE value equal to 99% [3], which can be replaced quickly and easily.

Das medizinische TPE-Gehäuse [1] enthält einen Filterhalter aus medizinischem Polypropylen [2], und Filter bestehend aus drei Schichten mit einem BFE-Wert von 99% [3], der schnell und einfach ausgetauscht werden kann.

Su carcasa médica de TPE [1] contiene un portafiltro médico de polipropileno [2] y filtro compuesto por tres capas con un valor de BFE igual al 99% [3], que puede reemplazarse rápida y fácilmente.

Son boîtier en TPE médical [1] contient un porte-filtre en polypropylène médical [2] et filtre composé de trois couches avec une valeur BFE égale à 99% [3], qui peut être remplacé rapidement et facilement.

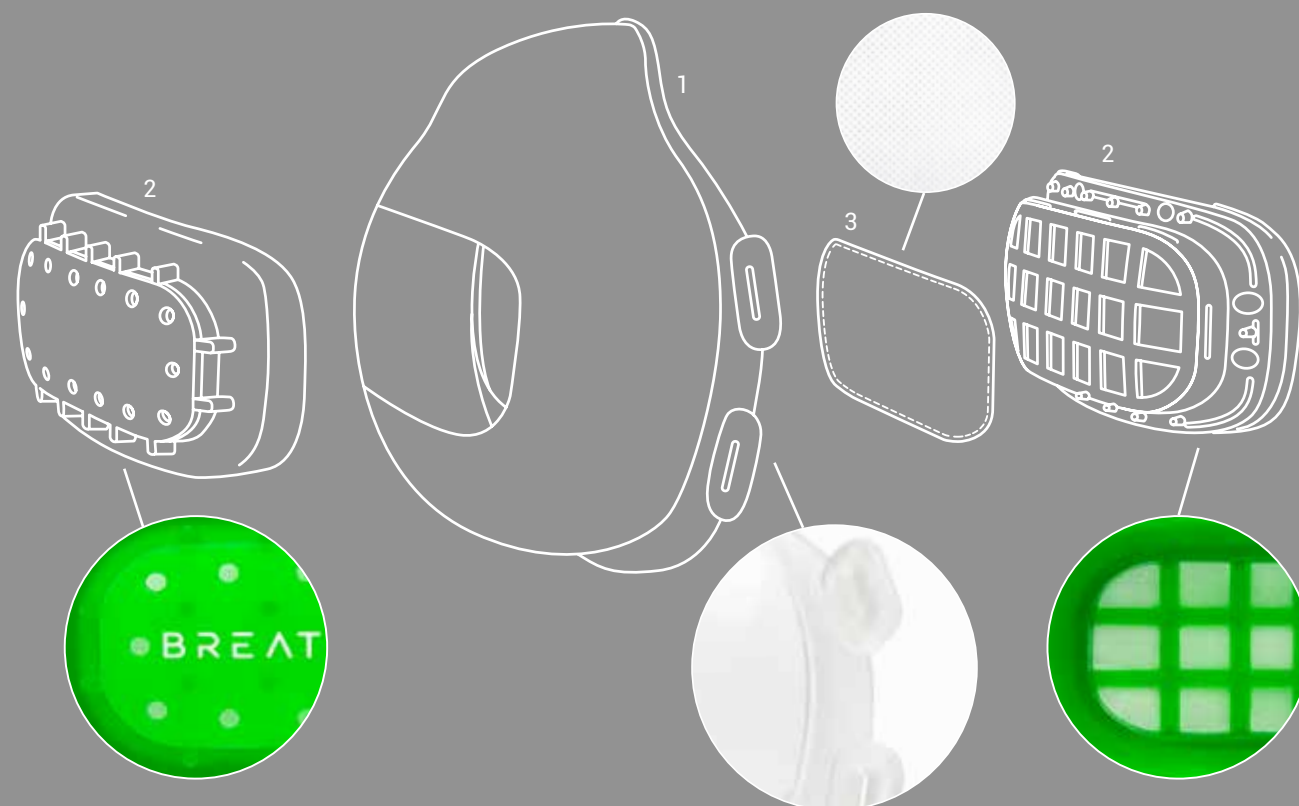

SOFT

- fino a 8/12 ore consecutive di massimo comfort grazie al leggerissimo involucro in TPE Medicale.
- up to 8/12 consecutive hours of maximum comfort thanks to the very light Medical TPE casing.
- Bis zu 8/12 aufeinanderfolgende Stunden maximalen Komforts dank des sehr leichten medizinischen TPE-Gehäuses.
- Hasta 8/12 horas consecutivas de máximo confort gracias a la carcasa médica TPE muy ligera.
- jusqu'à 8/12 heures consécutives de confort maximum grâce au boîtier Medical TPE très léger.



SICURA

- Clinicamente testata, garantisce la sua sicurezza al 100% impedendo l'ingresso di virus e agenti patogeni.
- Clinically tested, it guarantees its 100% safety by preventing the entry of viruses and pathogens.
- Klinisch getestet garantiert es seine 100% ige Sicherheit, indem es das Eindringen von Viren und Krankheitserregern verhindert.
- Probado clínicamente, garantiza su seguridad al 100% al evitar la entrada de virus y patógenos.
- Testé cliniquement, il garantit sa sécurité à 100% en empêchant l'entrée de virus et d'agents pathogènes.




TRASPIRANTE

- Perfetto sistema filtrante che offre una respirazione ottimale.
- Perfect filter system that offers optimal breathing.
- Perfektes Filtersystem für optimale Atmung.
- Sistema de filtro perfecto que ofrece una respiración óptima.
- Système de filtration parfait qui offre une respiration optimale.



ANTIAPPANNANTE

- Estrema ergonomicità, per garantire l'efficacia antiappannante degli occhiali.
- Extreme ergonomics, to ensure the anti-fog effectiveness of the glasses.
- Extreme Ergonomie, um die Antibeschlagwirkung der Brille zu gewährleisten.
- Ergonomía extrema, para garantizar la eficacia antivaho de las gafas.
- Ergonomie extrême, pour garantir l'efficacité anti-buée des verres.

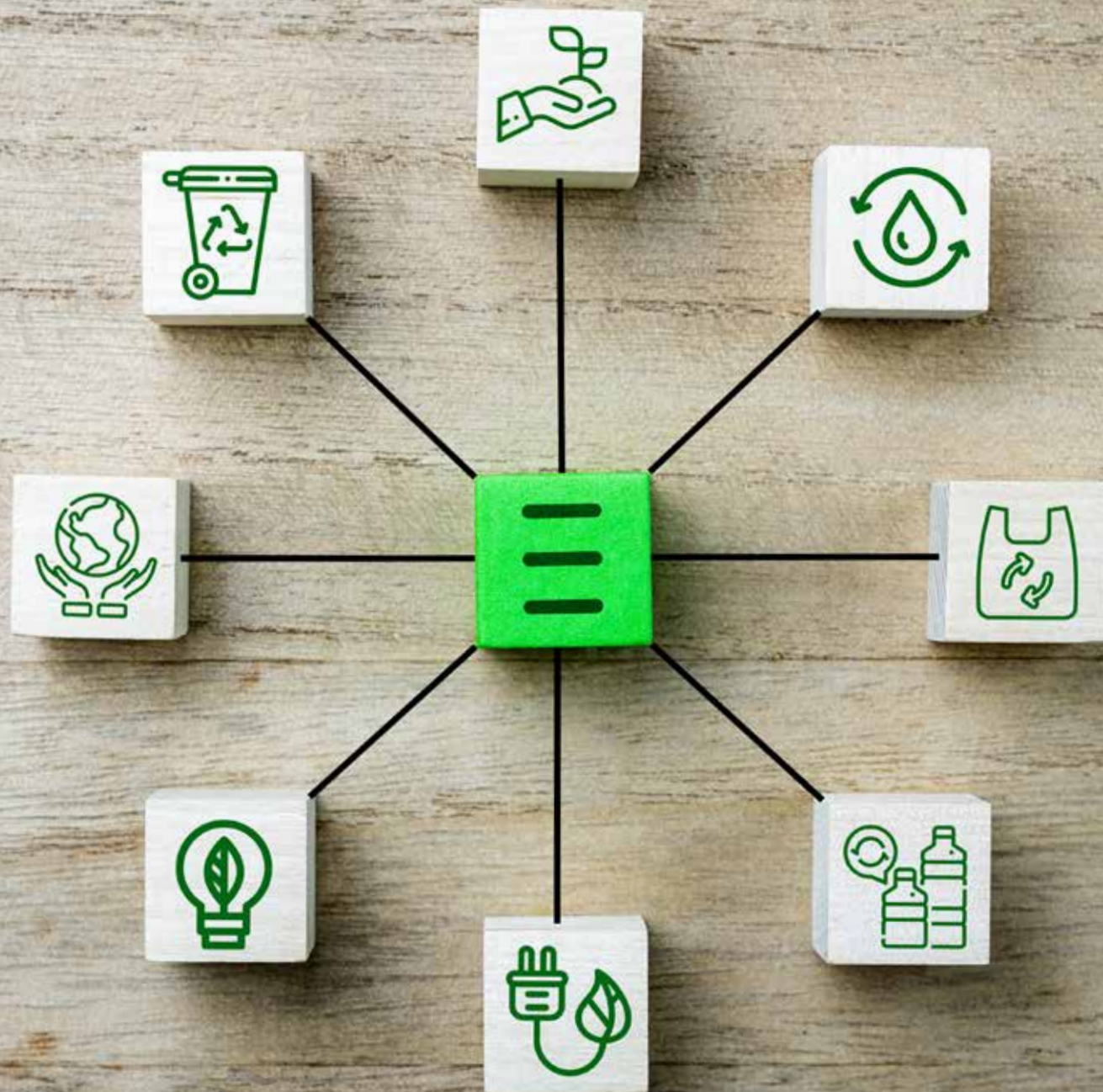

Breathe You amica dell'ambiente

L'attenzione al pianeta pone le basi ad una produttività responsabile basata sulla vera "green economy" che il nostro brand sposa in pieno. Ecco perchè Breathe You è amica dell'ambiente! È creata al 100% con materiali riciclabili, ed è riutilizzabile. Ogni parte è stata pensata per avere una "seconda vita" nel ciclo produttivo. Possiamo quindi dire che Breathe You è anche una mascherina "green", una mascherina che salvaguarda il futuro e l'ambiente. Abbiamo pensato che creando il nostro prodotto, dovevamo limitare quei fenomeni di inquinamento, i cui costi, molto più spesso, ricadono sulle generazioni future.

Attention to the planet lays the foundations for responsible productivity based on the true "green economy" that our brand fully embraces. That's why Breathe You is environmentally friendly! It is 100% created with recyclable materials, and is reusable. Each part has been designed to have a "second life" in the production cycle. We can therefore say that Breathe You is also a "green" mask, a mask that safeguards the future and the environment. We thought that by creating our product, we had to limit those pollution phenomena, the costs of which, much more often, fall on future generations.

Die Aufmerksamkeit für den Planeten legt den Grundstein für eine verantwortungsvolle Produktivität auf der Grundlage der wahren "grünen Wirtschaft", die unsere Marke voll und ganz umfasst. Deshalb ist Breathe You umweltfreundlich! Es besteht zu 100% aus recycelbaren Materialien und ist wiederverwendbar. Jedes Teil wurde so konzipiert, dass es im Produktionszyklus ein "zweites Leben" hat. Wir können daher sagen, dass Breathe You auch eine "grüne" Maske ist, eine Maske, die die Zukunft und die Umwelt schützt. Wir dachten, dass wir durch die Entwicklung unseres Produkts diese Verschmutzungsphänomene begrenzen müssen, deren Kosten viel häufiger bei zukünftigen Generationen liegen.

La atención al planeta sienta las bases para una productividad responsable basada en la verdadera "economía verde" que nuestra marca adopta plenamente. ¡Es por eso que Breathe You es ecológico! Está 100% creado con materiales reciclables y es reutilizable. Cada parte ha sido diseñada para tener una "segunda vida" en el ciclo de producción. Por lo tanto, podemos decir que Breathe You también es una máscara "verde", una máscara que protege el futuro y el medio ambiente. Pensamos que al crear nuestro producto, teníamos que limitar esos fenómenos de contaminación, cuyos costos, con mucha más frecuencia, recaen en las generaciones futuras.

L'attention portée à la planète jette les bases d'une productivité responsable basée sur la véritable «économie verte» que notre marque embrasse pleinement. C'est pourquoi Breathe You est écologique! Il est 100% créé avec des matériaux recyclables et est réutilisable. Chaque pièce a été conçue pour avoir une "seconde vie" dans le cycle de production. On peut donc dire que Breathe You est aussi un masque "vert", un masque qui protège l'avenir et l'environnement. Nous avons pensé qu'en créant notre produit, nous devions limiter ces phénomènes de pollution dont les coûts, bien plus souvent, pèsent sur les générations futures.

Confort e Made in Italy

Consapevoli della necessità di indossare tali dispositivi per lunghi periodi e per molte ore al giorno, abbiamo creato un prodotto “leggero” che “respira” garantendo la massima sicurezza e il massimo confort. Breathe You è un prodotto pensato e realizzato interamente in Italia, Possiamo affermare con orgoglio che il nostro prodotto è al 100% Made in Italy. Design e qualità che provengono dal distretto della calzatura e del fashion, sempre attenti al presente e quindi pronti a riqualificare e portare con “stile” in primo piano un'emergenza pandemica che non ha eguali da almeno un secolo. Dunque, stile e confort interamente italiani.

Aware of the need to wear these devices for long periods and for many hours a day, we have created a “light” product that “breathes” guaranteeing maximum safety and maximum comfort. Breathe You is a product designed and manufactured entirely in Italy, We can proudly say that our product is 100% Made in Italy.

Design and quality that come from the footwear and fashion district, always attentive to the present and therefore ready to redevelop and bring a “pandemic emergency” that has been unrivaled for at least a century, to the fore with “style”.

Therefore, entirely Italian style and comfort.

Wir sind uns der Notwendigkeit bewusst, diese Geräte über lange Zeiträume und viele Stunden am Tag zu tragen, und haben ein “leichtes” Produkt entwickelt, das “atmet” und maximale Sicherheit und maximalen Komfort garantiert.

Breathe You ist ein Produkt, das vollständig in Italien entwickelt und hergestellt wurde. Wir können stolz sagen, dass unser Produkt zu 100% in Italien hergestellt wird. Design und Qualität, die aus dem Schuh- und Modeviertel stammen, stets auf die Gegenwart achten und daher bereit sind, einen seit mindestens einem Jahrhundert unübertroffenen “Pandemie-Notfall” mit “Stil” in den Vordergrund zu rücken. Daher ganz italienischer Stil und Komfort.

Conscientes de la necesidad de usar estos dispositivos durante largos períodos y durante muchas horas al día, hemos creado un producto “ligero” que “respira” que garantiza la máxima seguridad y la máxima comodidad.

Breathe You es un producto diseñado y fabricado íntegramente en Italia. Podemos decir con orgullo que nuestro producto es 100% Made in Italy.

Diseño y calidad que provienen del distrito del calzado y la moda, siempre atentos al presente y, por lo tanto, listos para reconstruir y traer una “emergencia pandémica” que no ha tenido rival durante al menos un siglo, con el “estilo”.

Por lo tanto, estilo completamente italiano y confort.

Conscients de la nécessité de porter ces appareils pendant de longues périodes et de nombreuses heures par jour, nous avons créé un produit “léger” qui “respire” garantissant une sécurité et un confort maximum.

Breathe You est un produit conçu et fabriqué entièrement en Italie, nous pouvons dire avec fierté que notre produit est 100% Made in Italy. Un design et une qualité qui viennent du quartier de la chaussure et de la mode, toujours à l'écoute du présent et donc prêts à se redévelopper et à faire émerger une “pandémie d'urgence” inégalée depuis au moins un siècle, avec du “style”. Par conséquent, le style et le confort entièrement italien.







**Breathe You è realizzato
in diverse misure:
uomo, donna e bambino.**

**Breathe You is made
in different sizes:
man, woman and child.**

**Breathe You está hecho
en diferentes tamaños:
hombre, mujer y niño.**

**Atme dich ist gemacht
in verschiedenen Größen:
Mann, Frau und Kind.**

**Breathe You est fait
en différentes tailles:
homme, femme et enfant.**

Infinite combinazioni di colori. L'unico limite è la tua fantasia!

Endless combinations
of colors.
The only limit
is your imagination!

Infinitas combinaciones
de colores.
¡El único límite
es tu imaginación!

Endlose Farbkombinationen.
Die einzige
Grenze ist Ihre
Vorstellungskraft!

Combinaisons de
couleurs infinies.
La seule limite est
votre imagination!



Alcuni dati



Breathe You ha superato tutti i test fino ad aver ottenuto la classificazione:
UNI EN14683 chirurgica medicale tipo IIR 99 % BFE efficienza filtrazione batterica

Breathe You has passed all the tests until it has obtained the classification:
UNI EN14683 medical surgical type IIR 99% BFE bacterial filtration efficiency

Atme Du hast alle Tests bestanden, bis du die Klassifizierung erhalten hast:
UNI EN14683 medizinisch-chirurgischer Typ IIR 99% BFE Bakterienfiltrationseffizienz

Breathe You ha pasado todas las pruebas hasta que haya obtenido la clasificación:
UNI EN14683 médico quirúrgico tipo IIR 99% BFE eficiencia de filtración bacteriana

Breathe You a passé tous les tests jusqu'à l'obtention de la classification:
UNI EN14683 efficacité chirurgicale médicale de type IIR 99% BFE efficacité de filtration bactérienne

EFFICACIA DI FILTRAZIONE BATTERICA

Dimensione dell'area di test						50,3 cm²		
Lato del campione esposto all'aerosol						Interno		
Portata						28.2 ± 0.2 l/min		
Valore medio della conta totale delle piastre dei due controlli positivi						338 CFU		
Valore medio della conta totale delle piastre del controllo negativo						3 CFU		
Campione	1	2	3	4	5	Media	Deviazione standard	Varianza
BFE (%)	97,4	98,1	97,9	98,7	99,2	98,3	0,70	0,49
Risultato BFE (%)	99							

PULIZIA MICROBICA

Campione	1	2	3	4	5	Media	Deviazione standard	Varianza
Peso mascherina (g)	82,57	82,63	82,71	82,50	82,48			
Total Bioburden (TSA+SDA)	144	153	159	161	139			
Bioburden (UFC/g)	2	2	2	2	2	2	0	0
Risultato Bioburden (UFC/g)	2							



BREATHE  YOU®



MADE IN ITALY

Distribuito da VR srl
prodotto realizzato dalla ERREPI TECHNOLOGY®
Via Fontanelle 27 - 63812 Montegranaro FM
info@breatheyoud.it
www.breatheyoud.it

BREATH  YOU[®]

www.breathyou.it