



Dispositivo di pulizia ad ultrasuoni
conforme alle attuali leggi.

Elmasonic Med*



Area di utilizzo

Elmasonic Med è la serie di efficienti dispositivi di pulizia ad ultrasuoni che rappresentano una pre-pulizia affidabile di strumenti medici, dentistici e chirurgici.


Con una frequenza ultrasonica di 37 kHz è possibile rimuovere anche le contaminazioni più ostinate **.

La gamma di dispositivi Elmasonic Med con volumi del serbatoio da 3 a 90 litri (solo Med 30 senza scarico) sono adatti ad ogni esigenza. I detergenti chimici specifici sviluppati da Elma ed i pratici accessori come i cestini, supporti per vassoi, ecc. garantiscono i migliori risultati di pulizia.

** Elmasonic Med non sostituisce il trattamento in un dispositivo di pulizia e disinfezione.

PROGETTATO PER

- Studi Odontoiatrici
- Laboratori Dentali
- Centri medici
- Ospedali
- Cliniche estetiche

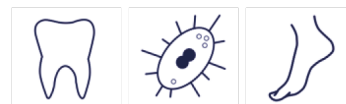

PULISCE

- Strumenti chirurgici, medici ed odontoiatrici
- Protesi e impianti
- Strumenti per podologia



RIMUOVE

- Sangue
- Tessuti e residui ossei, tartaro
- Alginati e gessi
- Paste per smerigliare e lucidare
- Cere, cementi
- Molte altre contaminazioni



PULITA

CONFORME ALLE DIRETTIVE MDR

I dispositivi elmasonic Med sono registrati come Prodotti medicali di classe I in linea con la Direttiva MDR (UE) 2017/745

DESIGN PULITO

Le superfici in acciaio inossidabile sono facili da pulire così come il display e la tastiera a membrana.

Il design è moderno.

INTELLIGENTE

5 MODALITÀ DI PULIZIA ULTRASONICA

Degas: Degasaggio rapido
Eco: Silenzioso ed efficiente dal punto di vista energetico, lunga durata del dispositivo
Sweep: Pulizia ad ultrasuoni più consistente
Impulso: Per i contaminanti più ostinati
Dinamico: Cambio automatico tra impulso e sweep per ottenere eccellenti risultati di pulizia

PROGRAMMI PERSONALIZZATI

Possono essere impostati e salvati nel menù quattro programmi personalizzati per processi affidabili e risultati di pulizia riproducibili

FACILE

INTUITIVO E ORIENTATO ALL'UTENTE

Il display intuitivo e facilmente leggibile permette l'impostazione semplice e precisa dei parametri di pulizia.

FEEDBACK DAL DISPOSITIVO

L'utente viene tenuto costantemente aggiornato sullo stato di funzionamento grazie al display ad esempio alla fine della pulizia o al raggiungimento della temperatura.

SICURA

TECNOLOGIA INTELLIGENTE

La temperatura limite può essere impostata individualmente: questo aiuta a prevenire la denaturazione delle proteine. Gli strumenti sono protetti e perfettamente puliti.

PROTEZIONE DELL'UTENTE

Il coperchio in plastica assicura un funzionamento più silenzioso. Il coperchio può essere utilizzato anche come vassoio per il cestello e gli strumenti puliti



Elma Schmidbauer GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 17
78224 Singen (Germany)
www.elma-ultrasonic.com

Subject to technical and optical changes.
Elmasonic Med_EN_01_20

**Medical Product Class 1 according to MDR
(EU) 2017/745. Please observe the laws and
legal regulations applicable in your country.

Distribuito da:
Simit Dental Srl
Via Carlo Pisacane, 5/A
46100 Mantova
www.simitdental.it

