

SlimShaper PRO®

L'EQUILIBRIO PERFETTO
PER L'ENDODONZIA
MINIMAMENTE INVASIVA




DualWire®

Con l'esclusiva tecnologia
DualWire®, brevettata da Zarc,
per una maggiore efficienza,
resistenza e flessibilità dello strumento.


Il miglior strumento per le anatomie complesse

SlimShaper PRO® è stato progettato specificamente per soddisfare le esigenze dei professionisti dell'endodonzia che lavorano con **anatomie complesse**, fornendo uno strumento innovativo che rappresenta l'avanguardia dell'**endodonzia minimamente invasiva**.

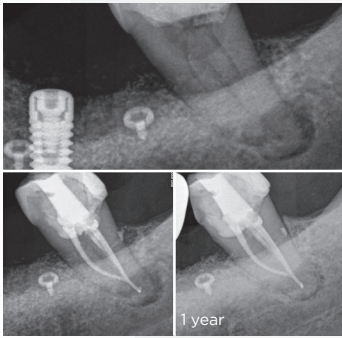


Dr. José Aranguren

Sistema minimamente invasivo con tecnologia DualWire®: capacità di taglio e flessibilità combinati in preparazioni altamente conservative.

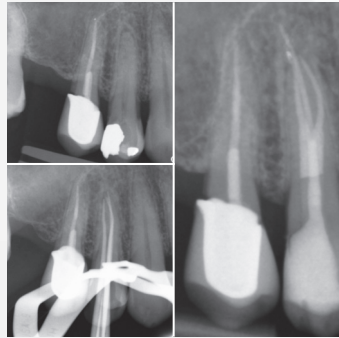

Dr. Massimo Giovarruscio

SlimShaper PRO®, grazie alla tecnologia DualWire®, garantisce un'eccezionale flessibilità ed efficacia di taglio, mantenendo il trattamento endodontico minimamente invasivo, soprattutto con piccole anatomie multiple e complesse.

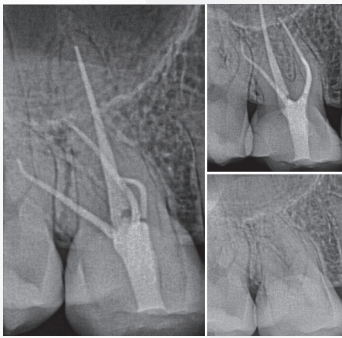

Professor Shanon Patel

SlimShaper PRO® cambia le regole del gioco. La tecnologia DualWire® rende la sagomatura facile e predicibile.



La tecnologia DualWire® è stata sviluppata da Zarc per ottenere il perfetto equilibrio tra efficacia, resistenza torsionale e flessibilità in ogni strumento SlimShaper PRO®.

SlimShaper PRO®

L'equilibrio perfetto

SlimShaper PRO® è il secondo sistema della famiglia PRO che ha rivoluzionato l'endodonzia grazie alla tecnologia DualWire®. Ora è più **flessibile, resistente ed efficace** che mai.

E' dotato di una **punta più affilata**, grazie al doppio trattamento termico negli ultimi 3mm, che offre **una maggiore efficienza di taglio, penetrazione del canale, e resistenza allo stress torsionale**. Ciò riduce il rischio di fratture o deformazioni.

Tecnologia DualWire®

La famiglia PRO di Zarc utilizza la tecnologia DualWire® per fornire agli strumenti il perfetto equilibrio tra efficacia, resistenza e flessibilità.



DualWire®

Il sistema minimamente invasivo

SlimShaper PRO® è un sistema di strumentazione con una flessibilità senza precedenti. La sua conicità del 3-4% lo rende ancora più conservativo, versatile e sicuro.

SlimShaper PRO®

SILVER + GOLD


Massima capacità di taglio, penetrazione del canale, e resistenza torsionale.

GOLD + PINK

L'equilibrio perfetto tra capacità di taglio e flessibilità.

GOLD + BLUE

Straordinaria flessibilità e una maggiore resistenza alla fatica ciclica.

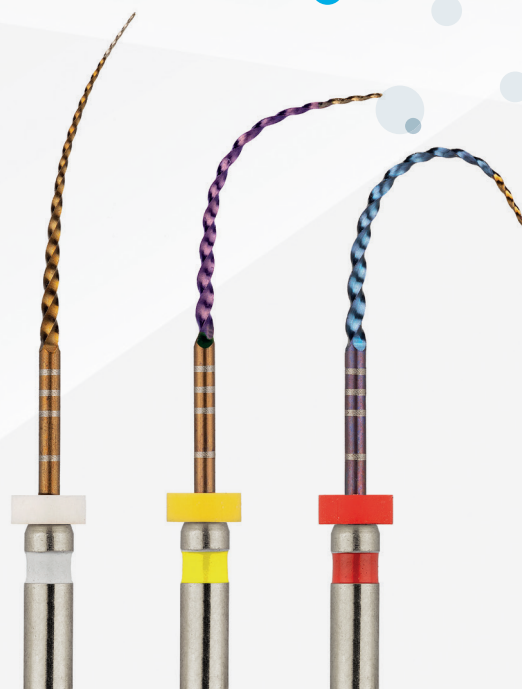

SlimShaper PRO® conserva il doppio della dentina rispetto ad un sistema di strumentazione canalare tradizionale.

Karim Aazzouzi-Raiss; Ana Ramírez-Muñoz; Pedro M. Mendez; Gaya C. S. Vieira; José Aranguren; Alejandro R. Pérez. J Endod . 2023 Apr;49(4):430-43.



Minimamente
invisivo



Massima capacità
di taglio



Resistenza
torsionale



Flessibilità e
memoria di forma



Versatilità

Massima flessibilità

SlimShaper PRO® è composto da 3 strumenti, tutti caratterizzati da tecnologia DualWire®.

Specificamente progettato per anatomie complesse (strette, larghe, e/o con doppia curvatura) o molto complesse.

ZS1



CONICITÀ

6-2%

Ø

15

ZS2



3-4%

20

ZS3



3-4%

25

SlimShaper PRO®

Facile integrazione nella routine clinica

La versatilità del sistema **SlimShaper PRO®** consente una gestione **facile e veloce** durante la preparazione del canale.

- Esclusiva tecnologia **DualWire®**.
- Nuovo sistema della famiglia **PRO** con **doppio trattamento termico in un unico file**.
- **Maggiore versatilità**, efficienza di taglio, resistenza torsionale, e migliore penetrazione del canale.
- **Resistenza** ciclica alla fatica.

In Zarc, siamo **leader nell'innovazione**

Referenze

SlimShaper PRO® 21 mm

ZAZSS210PRO1	ZS1 21 mm (6 Files) sterile
ZAZSS210PRO2	ZS221 mm (6 Files) sterile
ZAZSS210PRO3	ZS321 mm (6 Files) sterile
ZAZSS21APRO6	ZS1-ZS3 21 mm (6 Files) sterile
ZSS21APRO3	ZS1-ZS3 21 mm (3 Files) sterile

SlimShaper PRO® 25 mm

ZAZSS250PRO1	ZS1 25 mm (6 Files) sterile
ZAZSS250PRO2	ZS225 mm (6 Files) sterile
ZAZSS250PRO3	ZS325 mm (6 Files) sterile
ZAZSS25APRO6	ZS1-ZS3 25 mm (6 Files) sterile
ZAZSS25APRO3	ZS1-ZS3 25 mm (3 Files) sterile

Le punte di guttaperca e di carta dedicate al sistema SlimShaper PRO sono le medesime del sistema SlimShaper

SlimShaper PRO® 31 mm

ZAZSS310PRO1	ZS1 31 mm (6 Files) sterile
ZAZSS310PRO2	ZS231 mm (6 Files) sterile
ZAZSS310PRO3	ZS331 mm (6 Files) sterile
ZAZSS31APRO6	ZS1-ZS3 31 mm (6 Files) sterile
ZAZSS31APRO3	ZS1-ZS3 31 mm (3 Files) sterile

Gutta-percha

ZAGP-201	Gutta-percha ZS1 (60 pezzi)
ZAGP-202	Gutta-percha ZS2 (60 pezzi)
ZAGP-203	Gutta-percha ZS3 (60 pezzi)

Paper points

ZAPP-201	Paper points ZS1 (100 pezzi)
ZAPP-202	Paper points ZS2 (100 pezzi)
ZAPP-203	Paper points ZS3 (100 pezzi)

SIMIT NEXT
Endo Expert

Divisione Gruppo Simit Dental
www.simitdental.it

ZARC